

Hervorragendes
Preis-/Leistungs-
verhältnis!



USTOMED-Knochenblock- und Pin-Set

Competence in Instruments
made in
Germany

NEUHEIT

Das USTOMED - Knochenblock - Set

Zur Fixierung von Knochentransplantaten

(Gemeinschaftsentwicklung von Dr. Jan Kielhorn, D-74613 Öhringen und USTOMED INSTRUMENTE, D-78532 Tuttlingen/Germany)



Das sehr kompakte und universelle Set wurde speziell für alle Anforderungen in der modernen Implantologie konzipiert und ist ein Novum in seinem Segment.

Geometrie der Micro-Schrauben

- **präzise** gefräster Kreuzschlitz-Schraubenkopf
- **selbstspannende** Aufnahme-Klinge mit **Federwirkung**
- schnelle und einfache Aufnahme der **selbthaltenden** Schrauben
- **beste Friktion** zwischen Klinge und Schraubenkopf – **kein Ausleiern**
- wesentlich **leichtere Entfernung** von Geweberückständen aus dem Kreuzschlitz (im Vergleich zu Innenvierkant)

Micro-Schrauben aus Titan

- Durchmesser: 1,2mm / 1,4mm / 1,6mm
- Längen: 6mm / 8mm / 11mm / 13mm

Micro-Schrauben aus neuartiger Implantatstahl-Legierung

- Durchmesser: 1,0mm und 1,2mm
- Längen: 6mm / 8mm / 11mm / 13mm
- bestens geeignet für sehr **kleine Knochenfragmente** und **3D Augmentationen**
- durch spezielle **Implantat-Stahl-Legierung keine Osseointegration** und aufgrund dessen bei der Schraubenentfernung **geringere Bruchgefahr** als bei herkömmlichen Titan-Schrauben










Schraubendreher

- **optimale Grifflänge** - deshalb für alle Handgrößen bestens geeignet
- der sehr komfortable Griff garantiert ein **ergonomisches und ermüdungsfreies** Arbeiten

Aufbewahrungs-Box

- ausgeklügeltes, funktionelles und übersichtliches Design
- integriertes und herausnehmbares **Mess-Lineal** für die exakte Bestimmung der Schraubenlänge sowie für die Abmessung des Augmentats
- neuentwickeltes Material aus der Luft- und Raumfahrttechnik – **thermostabil**
- alle Teile eignen sich sowohl für die **maschinelle Aufbereitung** im Thermodesinfektor, als auch für alle gängigen Sterilisationsverfahren und entsprechen somit den neuesten **RKI-Richtlinien**

Preisblatt / Bestellblatt Knochenblock-Fixations-Set



Bestellnummer	Artikel-Bezeichnung		Preis	Bestellmenge
68-780-016	Titan - Knochenblock-Fixations-Set, bestehend aus:		589,00 €	[]
68-720-002	Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0mm - 1,6mm		-	
68-740-002	Schraubendreher, 11cm		-	
68-760-102	Klinge, Kreuz, selbsthaltend, für Ø 1,0mm - 1,6mm Schrauben, 60mm			
-	1 x Packung Titan -Schrauben nach Wahl		>> bitte unten ankreuzen	
-	1 x Pilotbohrer Ø 1,0mm oder Ø 1,2mm oder Ø 1,4mm		>> nach Wahl der Schrauben	
	Info: der Pilotbohrer ist immer 0,2mm kleiner als der Schraubendurchmesser			
68-780-010	Stahl - Knochenblock-Fixations-Set, bestehend aus:		659,00 €	[]
68-720-002	Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0mm - 1,6mm		-	
68-740-002	Schraubendreher, 11cm		-	
68-760-102	Klinge, Kreuz, selbsthaltend, für Ø 1,0mm - 1,6mm Schrauben, 60mm			
-	1 x Packung Stahl -Schrauben nach Wahl		>> bitte unten ankreuzen	
-	1 x Pilotbohrer Ø 0,8 mm oder Ø 1,0mm		>> nach Wahl der Schrauben	
	Info: der Pilotbohrer ist immer 0,2mm kleiner als der Schraubendurchmesser			
Implantat-Stahl-Legierung, 1 Packung = 10 Stück				
68-110-008 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,0mm, 8mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung		198,00 €	[]
68-110-011 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,0mm, 11mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung		198,00 €	[]
68-110-013 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,0mm, 13mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung		198,00 €	[]
68-112-008 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2mm, 8mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung		198,00 €	[]
68-112-011 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2mm, 11mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung		198,00 €	[]
68-112-013 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2mm, 13mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung		198,00 €	[]
Titan, 1 Packung = 10 Stück				
68-112-006	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2mm, 6mm Länge		120,00 €	[]
68-112-008	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2mm, 8mm Länge		120,00 €	[]
68-112-011	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2mm, 11mm Länge		120,00 €	[]
68-112-013	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2mm, 13mm Länge		120,00 €	[]
68-114-006	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4mm, 6mm Länge		120,00 €	[]
68-114-008	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4mm, 8mm Länge		120,00 €	[]
68-114-011	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4mm, 11mm Länge		120,00 €	[]
68-114-013	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4mm, 13mm Länge		120,00 €	[]
68-116-006	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,6mm, 6mm Länge		120,00 €	[]
68-116-008	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,6mm, 8mm Länge		120,00 €	[]
68-116-011	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,6mm, 11mm Länge		120,00 €	[]
68-116-013	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,6mm, 13mm Länge		120,00 €	[]
Klingen				
68-760-102	Klinge, Kreuz, selbsthaltend, für Ø 1,0mm - 1,6mm Schrauben, 60mm		54,00 €	[]
68-760-106	Klinge, Kreuz, selbsthaltend, für Winkelstück, für Ø 1,0mm - 1,6mm Schrauben, 17mm		55,00 €	[]
Pilotbohrer				
68-508-014	Pilotbohrer, Ø 0,8mm, 14mm Länge, für Ø 1,0mm Schrauben, m. Tiefenmark.		34,90 €	[]
68-510-014	Pilotbohrer, Ø 1,0mm, 14mm Länge, für Ø 1,2mm Schrauben, m. Tiefenmark.		34,90 €	[]
68-512-014	Pilotbohrer, Ø 1,2mm, 14mm Länge, für Ø 1,4mm Schrauben, m. Tiefenmark.		34,90 €	[]
68-514-014	Pilotbohrer, Ø 1,4mm, 14mm Länge, für Ø 1,6mm Schrauben, m. Tiefenmark.		34,90 €	[]
68-516-014	Pilotbohrer, Ø 1,6mm, 14mm Länge, für Ø 1,6mm Schrauben, m. Tiefenmark.		34,90 €	[]
Sonstiges				
68-720-002	Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0mm - 1,6mm		249,00 €	[]
68-740-002	Schraubendreher, 11cm		229,00 €	[]
68-860-008	Micro-Titan-Platten, 0,6 mm, 8-Loch 		49,67 €	[]
68-860-012	Micro-Titan-Platten, 0,6 mm, 12-Loch 		69,43 €	[]

NEUHEIT

Das USTOMED-Titan-Pin-Set

Titan-Pins zur Fixierung von Titanfolien und Membranen

(Gemeinschaftsentwicklung von Dr. Jan Kielhorn, D-74613 Öhringen und USTOMED INSTRUMENTE, D-78532 Tuttlingen/Germany)

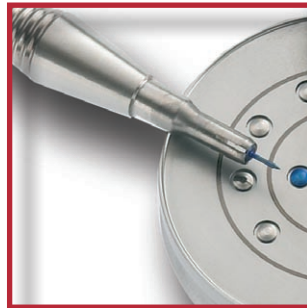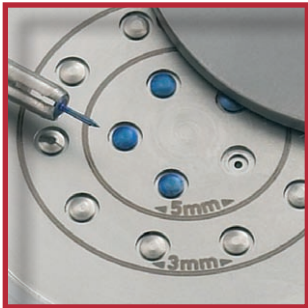

Einbringinstrument:

- ▶ Einteiliges Einbringinstrument für die Aufnahme der Titan-Pins aus der Aufbewahrungsbox – dadurch ist ein Verdrehen des Arbeitsendes während der Applikation ausgeschlossen.
- ▶ Äußerst komfortable Griff-Ergonomie zur leichten Aufnahme der Titan-Pins.

Aufbewahrungsbox:

- ▶ Funktionelles Design
- ▶ Sicheres und einfaches Öffnen durch Einhandbedienung
- ▶ Aufbewahrungsbox für 15 Titan-Pins (3 mm: 10 Stück / 5 mm: 5 Stück)

Titan-Pins:

- ▶ Erhältlich in 3 mm und 5 mm Länge



Abb. stark vergrößert



Bestell-Nr. 68-780-018

Preisblatt / Bestellblatt Titan-Pin-Set

Bestellnummer	Artikel-Bezeichnung		Preis	Bestellmenge
68-780-018	Titan-Pin-Set, komplett, bestehend aus:		249,00 €	[]
68-720-008	Aufbewahrungs-Behälter für 15 Titan-Pins, 10x3mm, 5x5mm		-	
68-650-000	Titan-Pin-Applikator, 15,5 cm		-	
-	1 x Packung Titan-Pins nach Wahl >> bitte unten ankreuzen		-	
Titan-Pins, 1 Packung = 10 Stück				
68-620-003	Titan-Pins, 3mm Länge, 10 St.		69,00 €	[]
68-620-005	Titan-Pins, 5mm Länge, 10 St.		69,00 €	[]
Sonstiges				
68-720-008	Aufbewahrungs-Behälter für 15 Titan-Pins (10 Löcher f. 3mm u. 5 x 5mm)		119,00 €	[]
68-650-000	Titan-Pin-Applikator, 15,5 cm		109,00 €	[]

NEU!
Bestellen Sie jetzt
versandkostenfrei:
www.ustomed-shop.de



 **USTOMED**
INSTRUMENTE

USTOMED INSTRUMENTE
Ulrich Storz GmbH & Co. KG

Hersteller von Chirurgie- und
Dentalinstrumenten

Manufacturer of Surgical and
Dental Instruments

Am Eichbühl 70-72
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 (0) 7461/9 65 85 0
Fax: +49 (0) 7461/9 65 85 65

info@ustomed.de
www.ustomed.de